

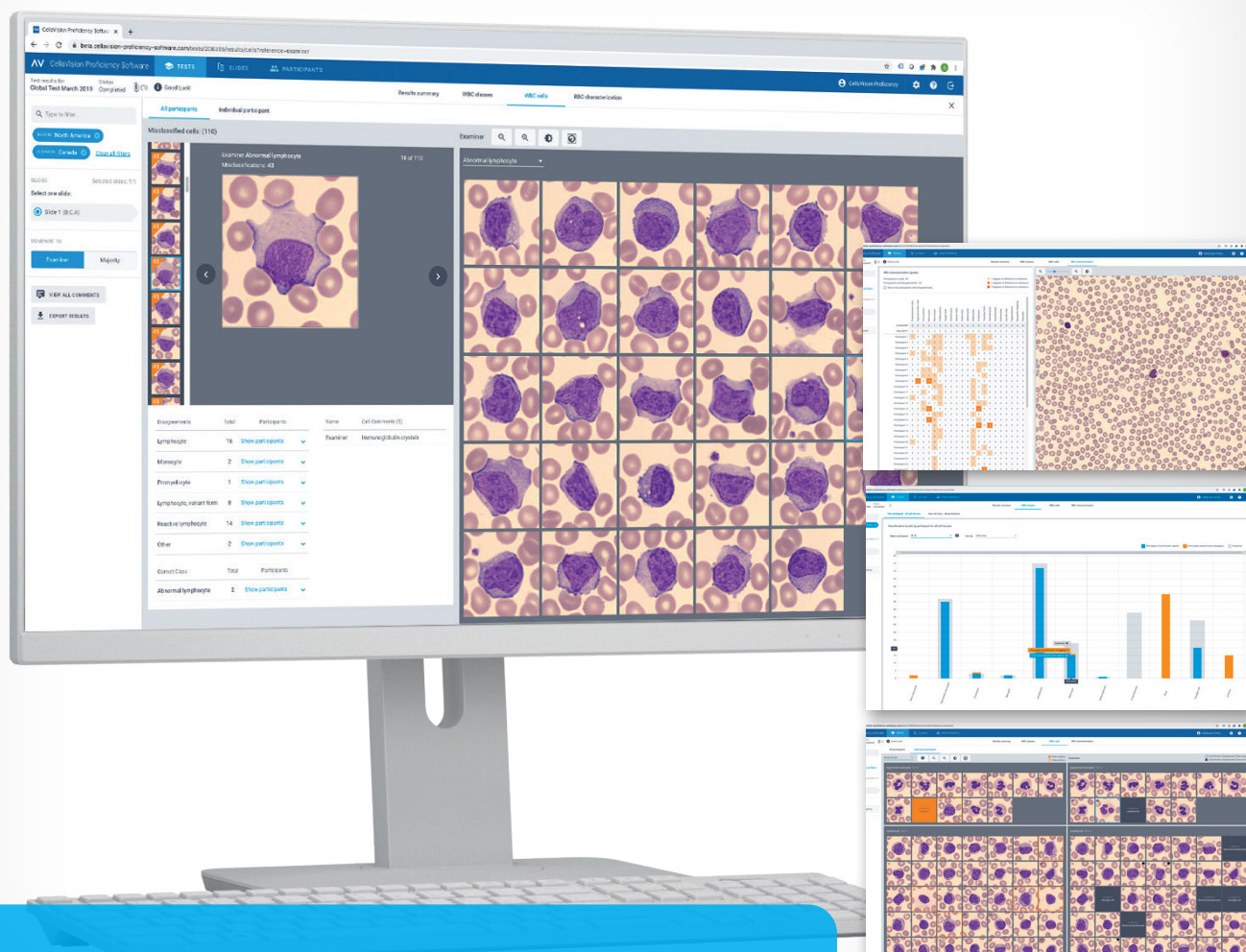


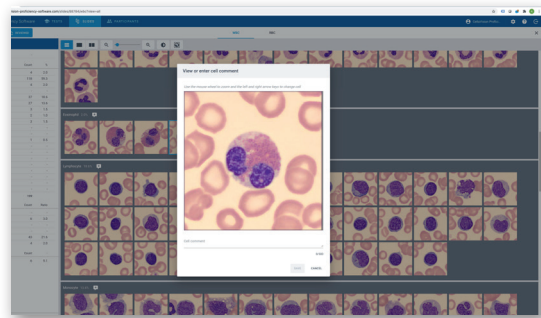

## CellaVision® Proficiency Software

O CellaVision Proficiency Software é uma ferramenta inovadora concebida para auxiliar gestores de laboratórios na avaliação, monitoramento e promoção das competências do pessoal na área da morfologia celular. Esta ferramenta baseada na Web facilita a estruturação de um processo eficaz para a avaliação da proficiência e promoção de competências, poupando tempo, esforços e recursos.

Implementado sozinho ou juntamente com analisadores CellaVision e seus aplicativos de suporte, o CellaVision Proficiency Software atua como uma plataforma para a promoção de competências na área da morfologia celular, facilitando esforços para se fornecer resultados mais exatos e padronizados.

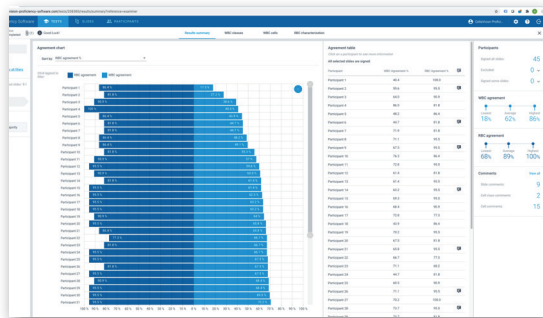

## Como funciona?

- O software foi concebido para avaliar a capacidade da equipe para realizar contagem diferenciais de sangue e fluidos corporais
- A ferramenta pode ser acessada a partir de qualquer computador conectado à internet, usando um login seguro em contas personalizadas de usuários
- O examinador pode criar cenários de avaliação incluindo lâminas digitais, a partir do seu próprio banco de dados CellaVision DM ou a partir de uma biblioteca de lâminas digitais fornecida pela CellaVision
- Os participantes são notificados automaticamente quando uma nova avaliação está disponível e recebem instruções para realizar as contagens diferenciais em uma ou mais lâminas digitais
- Após finalizar, os participantes podem visualizar seus resultados, compara-los com os do examinador e dos outros participantes
- O examinador recebe automaticamente um relatório de desempenho que destaca áreas que necessitam de maior treinamento e desenvolvimento de competências

## Por que o CellaVision Proficiency Software?

- Adequado para empresas de qualquer porte
- Pode ser customizado para explorar lacunas de competências ou satisfazer necessidades específicas de treinamento
- Os testes são rápidos e fáceis de se criar e gerenciar
- Os participantes podem acessar e efetuar os testes de forma fácil e rápida
- Os resultados são compilados automaticamente
- Fácil de retornar a testes anteriores para controlar o progresso dos participantes

## CARACTERÍSTICAS

On line, com acesso instantâneo através de um navegador da internet a partir de qualquer lugar

Mecanismo de notificação integrado para os participantes

Relatórios automáticos para o examinador

Feedback automático para os participantes

## CellaVision® Proficiency Software

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

#### ESPECIFICAÇÕES RECOMENDADAS PARA PC

- Navegador: Última versão do Google Chrome, Microsoft Edge (Chromium based), Mozilla Firefox, Apple Safari
- 2 GB RAM
- Largura de banda 8 Mbps
- Resolução da tela 1920 x 1080

#### DEPENDÊNCIAS

Transfer Tool (somente pode ser usada com o CellaVision Remote Review Software, versão 4.0 ou superior)

#### LICENÇAS

Selecione de uma gama de opções de licença:

- 10, 30, 50, 70 ou 100 usuários
- 3 ou 7 anos

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Este produto pode não estar disponível em todos os mercados.