



RAL SmearBox

Permet à votre laboratoire de réaliser des frottis de sang périphérique standardisés de haute qualité. L'instrument automatisé utilise un consommable breveté pour produire des frottis directement à partir d'un tube d'échantillon fermé. Grâce à cette méthode de préparation des frottis sur tube fermé, l'instrument réduit considérablement l'exposition aux risques biologiques tout en mettant en oeuvre un processus de réalisation de frottis fiable et contrôlé.

L'instrument est calibré pour produire des frottis idéalement adaptés à l'analyse avec les systèmes CellaVision. Il contribue à l'amélioration du processus de réalisation de numérations différentielles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Instrument **automatisé**

Méthode de préparation des frottis à partir d'un **tube fermé**

Favorise **l'efficacité**, la **standardisation** et la **sécurité**

Frottis compatibles aux **systèmes CellaVision**

Adapté aux **laboratoires de plus faible activité**

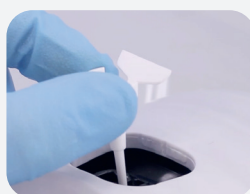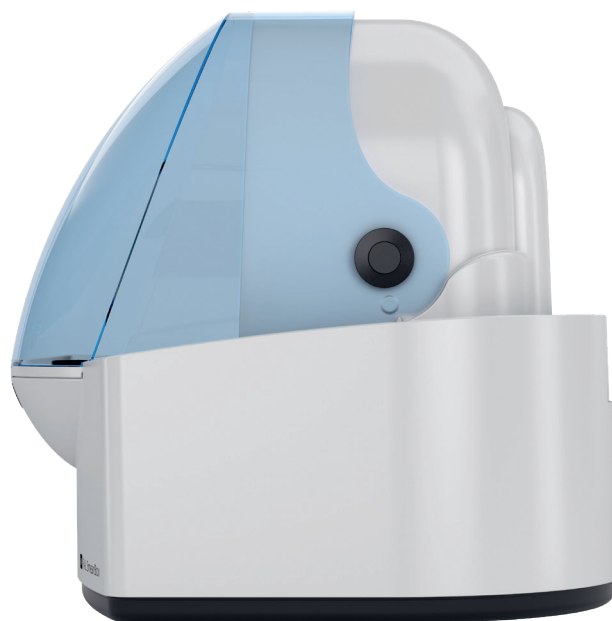

RAL SmearBox

CONSOMMABLE ASSOCIÉ



La Ral SmearBox est utilisée avec un consommable, le **RAL SmearBox Slide Spreader**. Ce dernier réalise trois tâches : il perce le tube, dépose une goutte et étale le sang sur la lame.

Le consommable est conditionné sous forme de packs 10x48 unités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TAILLE (L x P x H)

• 23,5 x 23,8 x 23,3 cm

CAPACITÉ

1 lame /cycle

CONDITIONS REQUISES POUR LES LAMES ET TUBES

Compatible avec la majorité des lames et tubes conformément à la norme ISO 8037/1-1986

POIDS

• 2,2 kg

CADENCE

~30 lames /heure

PLAGE DE TENSION DE SECTEUR

24 V avec adaptateur d'alimentation CA/CC
110-240 V