



RAL StainBox

Die RAL StainBox stellt sicher, dass Ihre Ausstriche einheitlich und gemäß den Richtlinien Ihres Labors gefärbt werden. Das halb-automatisierte Gerät nutzt das Eintauchverfahren und führt den Anwender effektiv durch die einzelnen Schritte des Färbeprozesses. Mit dem System werden innovative gebrauchsfertige, methanolfreie Färbe-Kits verwendet. Die Kombination von hochwertigen Reagenzien mit validierten Färbeprotokollen liefert mit jedem Lauf hervorragende Ergebnisse.

Das Gerät und die dazugehörigen Reagenzien wurden entwickelt, um gefärbte Objektträger zu erhalten, die ideal für die Analyse mit CellaVision-Systemen geeignet sind. Es trägt somit zu einem verbesserten Verfahren zur Durchführung von Blutzellendifferenzierungen bei.

HAUPTMERKMALE

Halb-automatisierter
Betrieb



Verwendung des
Eintauchverfahrens

Einsatz **methanolfreier**
Färbe-Kits

Für **Beständigkeit** und
Sicherheit

Für **CellaVision**
Systeme optimierte
Färberesultate

Für **Labore mit**
geringerem Durchsatz

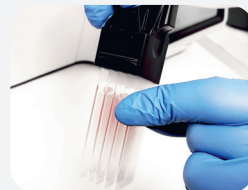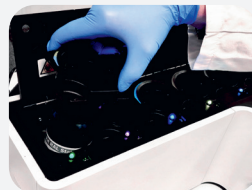

RAL StainBox

ZUBEHÖR



Die RAL StainBox ist ein geschlossenes System, das zusammen mit einem der zugehörigen Färbe-Kits verwendet werden muss. Diese sind methanol-frei und verringern die Belastung des Personals durch giftige Chemikalien. Sie sind zudem direkt gebrauchsfertig, d. h. es müssen nicht zuerst Reagenzien gemischt oder verdünnt werden. Jedes Kit färbt bis zu 300 Objektträger und ist nach dem Öffnen 28 Tage lang haltbar.

KIT RAL STAINBOX MCDH

- Puffer mit einem pH-Wert von 7,0
- Für die Färbung von Blutaussstrichen

KIT RAL STAINBOX BBM

- Puffer mit einem pH-Wert von 7,2
- Für die Färbung von Blutaussstrichen und Knochenmarkpräparaten

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (B × T × H)

- 55 × 25,7 × 19,8 cm

GEWICHT

- 3,988 kg

KAPAZITÄT

5 Objektträger/Zyklus

DURCHSATZ

~20 Objektträger/Stunde

VORAUSSETZUNGEN FÜR OBJEKTRÄGER

Kompatibel mit Objektträgern gemäß ISO 8037/1-1986.

ANZAHL DER PROTOKOLLE

10

VERSORGUNGSSPANNUNG

12 V über Netzteil für 110–240 V